



W10

Használati utasítás

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ info@medent.hu


☎ +3630-647-2266

Importőr MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2096 Üröm, Kossuth
utca 7/b. www.medent.hu Adószám: 27907759-2-13



Fontos biztonsági figyelmeztetés

- Ez a termék csak Oclean fúvókákkal használható. Harmadik féltől származó tartozék használata miatt semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- Ne használja a készüléket szájtisztításon kívül más célokra, különben a víz szembe, orrba, fülbe vagy torokba történő permetezésével véletlen sérülést okozhat.
- Azok a személyek, akik éppen most estek át szájsebészeti beavatkozáson. Javasoljuk, hogy az a fogyasztó, akinek szájbetegsége van, például súlyosan bevérzett ínye, konzultáljon fogorvossal, mielőtt ezt a fogkefét használná.
- Az első alkalommal, amikor használja, kellemetlen érzést vagy vérzést tapasztalhat, ez normális jelenség, és ahogy javul az ínye egészsége, a kellemetlen érzés megszűnik.
- Ha a vérzés erős, vagy ha 3-4 hét után is vérzik, kérjük, forduljon fogorvoshoz.
- Ez a termék csak hideg vagy meleg vízzel (40 °C alatt), vagy a gyártó utasításában meghatározott speciális oldatokkal használható.
- 12 év alatti gyermekek számára nem ajánlott. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ezt a készüléket 12 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Csak a terméken feltüntetett forgalmazásnak megfelelő biztonsági extra alacsony feszültségen szabad táplálni.
- Mivel a vizes rekesz kihúzható, biztonsági okokból a terméket vízszintesen kell tölteni.
- A nem cserélhető elemeket tartalmazó termékek használati utasításának tartalmaznia kell az alábbiakat: Ez a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyek csak szakképzett személyek által cserélhetők ki.
- Kérjük, győződjön meg róla, hogy a töltőport száraz a töltés előtt.
- A termékhez csak az Oclean speciális C típusú töltőkábel használható. Az Oclean nem vállal felelősséget az ettől eltérő következményekért.
- Az első használat előtt távolítsa el a csomagolóhabot a vizes rekeszből.

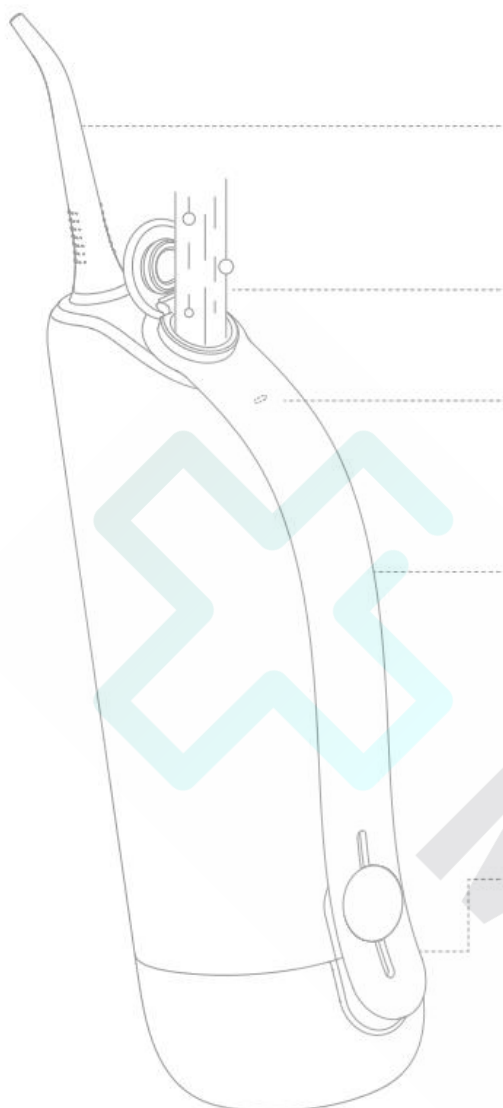

Fúvóka

Vízbefecskendező nyílás

Nyissa ki a fedelet, és fecskendezzen be

Szellőzőnyílás

Gépi test csat

A gép használatakor dugja át a kezét a gép testének csatján, hogy jobban tartsa a szájöblítőt.

A géptest víztartályának alsó fedele

Nyomja meg a vízrekesz alsó fedelének alját, lassan húzza lefelé a vízkompartmentet, és öntözze be a vizet.

Az akkumulátor jelzőfénye

Piros fény villog: alacsony akkumulátor-elfoglaltságra figyelmeztet.

Fehér fény légzés: töltési állapot

Fehér fény normálisan világít: az akkumulátor teljesen feltöltött, a szájöblítő

Erőtéljes normál üzemmód

Normál normál üzemmód

Érzékeny normál üzemmód

Impulzus üzemmód

Pontfelvételi mód

C-típusú töltőcsatlakozó

Nyissa ki a fedelet, dugja be az USB töltőkábelt, és töltsse fel.


Fúvóka szerelőgomb

Nyomja meg a gombot, és helyezze a fúvókát a szájöblítő főtestébe. Nyomja meg ismét a gombot, és vegye ki a fúvókát a szájöblítő főtestéből.

Bekapcsológomb

A szájöblítő indításához nyomja meg röviden a bekapcsológombot, a fehér fény normálisan világít, majd a kikapcsoláshoz nyomja meg újra röviden a bekapcsológombot.

Mód gomb

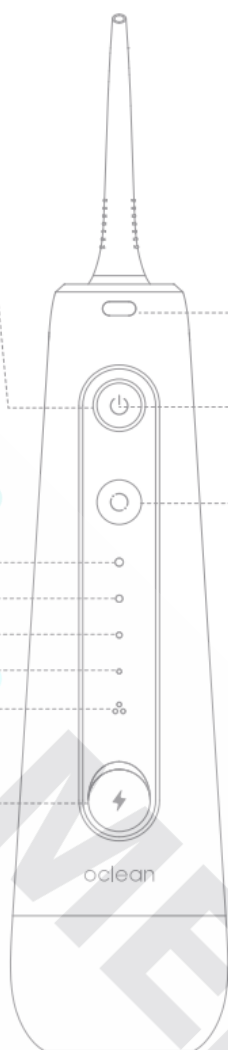

Használati utasítás

1. Szerelje be a fúvókát


Helyezze be a fúvókát a szájöblítő főtestébe.

2. Fecskendezzen vizet a víztartályba

Fedelet és injektáljon tiszta vizet, a víz hőmérséklete megfelelő, hogy kényelmesen érezze magát (ajánlott nem meghaladni a 40°C-ot), majd zárja le a fedelet, és a telepítés befejeződött.

3. Kapcsoló gomb

Az üzemmódváltáshoz nyomja meg röviden az "üzemmód gombot".

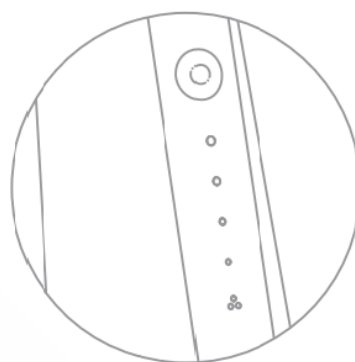

4. Használat előtti előkészítés

Használat előtt kérjük, hajoljon le kissé, és tolja be a fúvókát a szájába, célozza meg a fogakat, a fogak közötti réseket vagy az ínyt, hogy a vízáramlás merőleges legyen az öntözési pozíciókhoz, és ugyanakkor nyissa ki kissé a száját, hogy az öntözővíz ki tudjon folyni a szájából.

Meleg tippek:A

szájöblítő első használatakor viszketést vagy enyhe ínyvérzést tapasztalhat. Ez a jelenség általában 1-2 héten belül megszűnik, ha meghaladja a 2 hetet, az azt jelezheti, hogy az ínye rendellenes, kérjük, hagyja abba a szájöblítő használatát, és forduljon fogorvoshoz.

5. Öntözési művelet

A termék használatának megkezdéséhez nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ez a termék 2 perces időzített kikapcsolási funkcióval rendelkezik, ha folytatni szeretné, kérjük, nyomja meg újra a bekapcsológombot, és győződjön meg arról, hogy van víz a víztartályban. Ha használat közben szünetet kell tartania, kérjük, nyomja meg a bekapcsoló gombot, és ha folytatni szeretné, kérjük, nyomja meg újra a bekapcsoló gombot.



Vízmennyiség emlékeztető funkció

A vízáramlási impulzus erőssége kétszer változik, hogy emlékeztessen a vízmennyiség-változásra, és a vízáramlási impulzus az emlékeztető után azonnal visszatér a normál értékre. Amikor a víztartály alapértelmezés szerint vízzel van feltöltve: a Teljesítményes normál üzemmódban, Normál üzemmódban a szájoáblító minden alkalommal emlékeztet, amikor az aktuális fokozat elméleti munkaidejének 3/4, 1/2, 1/4-éhez érkezik, összesen 3-szor emlékeztet.

Például az egyenes öntöző üzemmódban a szájoáblító továbbra is 60s-ig permetezheti a vizet. Az indítás után az emlékeztetés egyszer történik 45s, 30s és 15s után.

Megjegyzés: a "maradék vízre emlékeztető" funkció csak az egyenes öntözési üzemmódban és az impulzus üzemmódban engedélyezett, a funkció nem engedélyezett a "pontfelvételi üzemmódban".



Vegye ki a fúvókát a fődarabból, és minden használat után mossa ki a fúvókát, hogy eltávolítsa a maradékot.



Használat után nyomja meg a vízrekesz alsó fedelének gombját, és lassan húzza le, és ha a vízrekeszben maradék víz van, kérjük, ürítse ki a maradék vizet. Nyissa ki az alsó vízrekesz fedelét, és öntse ki az összes maradék vizet a vízrekeszből.



Tisztítás után törölje át a főtest felületét száraz, puha ruhával.


Töltés

Használat közben, ha az akkumulátor töltöttsége 15%-nál alacsonyabb, az akkumulátor jelzőfénye pirosan villogni kezd, kérjük, időben töltse fel. Fedje le a töltés vízálló fedelét, kérjük, időben töltse fel. Fedje le a töltő vízálló fedelet a géptest elején, és helyezze be az USB töltőkábelt a töltés megkezdéséhez. Töltési állapotban az akkumulátor jelzőfénye fehér fényű lélegző állapotban van, amikor a töltés befejeződött, az akkumulátor jelzőfénye fehér fényű normál bekapcsolt állapotban van.


Fúvóka utasítás



Standard fúvóka
Napi tisztításhoz

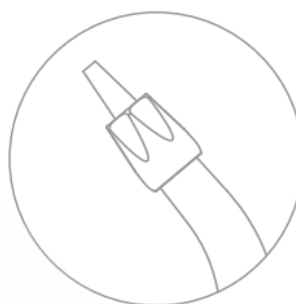

Parodontális zseb fúvóka
Parodontális zsebtisztításhoz

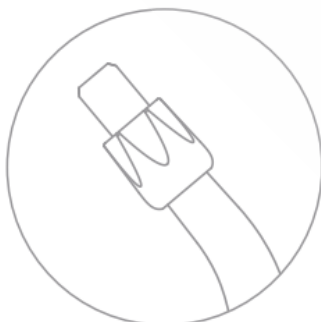

Fogszabályozó fúvóka
Fogszabályozó tisztításhoz



Nyelvkaparó
Nyelvtisztításhoz

Termékleírások

Termék neve	Oclean W10 hordozható szájoáblító készülék
Modell	W6010
Vízrekesz kapacitása	260ml (±5%)
Bemeneti teljesítmény	5V --- 1A
Töltés	USB Type-C töltőkábel
Bemenet	DC 5V/1A
Ajánlott töltő specifikációk	Töltő DC 5V/1A töltőáramú töltővel
Szolgáltatási időszak	30 nap (*)
Az akkumulátor kapacitása	1400mAh (**) Lítium-ion akkumulátor
Töltési idő	4 óra (**)
Termék mérete	72x55x267mm (a fúvóka magasságával együtt)
Termék nettó súlya	278g
Executive Standard	IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60335-2-52

* Megjegyzés:

- A teljesítmény a bemeneti teljesítmény.
- Naponta egyszer öntözze a fogakat impulzus üzemmódban, minden alkalommal 1 rekesz vízzel.

** Az akkumulátor kapacitása elméletileg ±50mAh kapacitástűréssel rendelkezik.

Fontos használati tippek

- Kérjük, ne használja a terméket a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő módon.
- Kérjük, ne használja ezt a terméket a fúvóka felszerelése nélkül.
- Azok a személyek (beleértve a gyermekeket is), akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, például nem rendelkeznek teljes polgári cselekvőképességgel, a terméket gondviselő felügyelete és irányítása mellett használhatják, tisztíthatják és karbantarthatják.
- Csak az Oclean által szállított, értékesített és ajánlott fúvókát és tartozékokat szabad használni.
- Kérjük, a sérülések és veszélyek elkerülése érdekében ne szerelje szét a terméket, és ne változtassa meg a termék alkatrészeit.
- Kérjük, ne használja ezt a terméket a szájuregi tisztításon kívül más célra.
- Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne nyomja a fúvókát erősen az ínyre vagy a fogakra.

- Kérjük, ne használja vagy működtesse ezt a terméket olyan helyeken, ahol aeroszoloikat (spray-eket) használnak a szabadban, vagy ahol oxigénellátás történik.
- Kérjük, távolítsa el minden fogdíszt, amikor ezt a terméket használja.
- Kérjük, ne használjon a termékben jódot, sós vizet vagy vízben nem oldódó, koncentrált illóolajokat. Ezeknek a folyadékoknak a használata csökkenti a termék teljesítményét és lerövidíti az élettartamot, kérjük, ne fecskendezzen tiszta szájvíz folyadékot ebbe a termékbe, ha szájvizet kell használni, kérjük, hígítsa fel az arálynak megfelelően a befecskendezés előtt, és a hígított szájvíz használata után újra tiszta vízzel kell öntözni a belső csövek tisztításához.
- Kérjük, ne használja a főttest teljesen vízbe merítve, és használat után törölje le a főttest száraz ruhával.
- Ha hosszabb ideig nem használja ezt a terméket, kérjük, ürítse ki a víztartályt szárazra, tisztítsa meg a fúvókát, a főttest és a töltőkábelt, és tárolja hűvös és száraz helyen.
- Az új gép első néhány használatakor enyhe műanyagszag lehet, ez normális jelenség, és egy bizonyos használat után a szag eltűnik.

Jótállási feltételek

A MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nél vásárolt új termékre 1 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylattal.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..

Bejegyzett székhely: 2096 Üröm, Kossuth utca 7/b.

Adószám: 27907759-2-13

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Cím: Hordozható szájóblító

Modell / típus: W6010

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

