



Flow

Használati utasítás

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ info@medent.hu

☎ +36 30 647 2266

Importőr MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2096 Üröm, Kossuth
utca 7/b. Adószám: 27907759-2-13




Fontos biztonsági figyelmeztetés

- Amikor először használja a terméket, a kefe nagy sebességű rengése miatt, ha zsibbadást érezhet, kérjük, ne aggódjon, ez normális, és az érzés gyengül és fokozatosan eltűnik körülbelül 7-14 nap alatt.
- Ha hosszú ideig nem használja (a termék akkumulátorának nincs energiája a készenléti energiafogyasztás miatt), amikor a fogkefe töltése során a töltésjelző nem jelenik meg, kérjük, várjon 6-10 percet türelmesen, akkor a normál töltés helyreállhat.
- Ha a fogkefe fő része töltés közben kissé felmelegszik, az normális. Ha kezével forróságot érez, kérjük, azonnal állítsa le a töltést, és küldje be a fogkefét az Oclean vevőszolgálati központjába vizsgálatra.
- A termék csak az Oclean elektromos fogkeféhez való speciális kefefefejet tudja használni. Az Oclean nem vállal felelősséget minden olyan következményért, amelyet más nem hivatalos vagy nem engedélyezett kefefejek használata okoz.
- A termék kizárólag fogtisztításra szolgál, és nem használható más célra.
- A termék kizárólag személyes higiéniai terméként szolgál. Nem ajánlott, hogy egyszerre több személy használja.
- A termék csak beltérben használható, ne tegye a fogkefét hosszú időre a tűző napra. Száraz, jól szellőző, normál hőmérsékletű helyre kell helyezni.

Figyelmet kell fordítani a következő szájüregi érzékenységekben szenvedőkre:

- Azok, akik nemrégiben estek át parodontális műtéten, vagy kezelés alatt állnak.
- A szájban egyéb tüneteket mutató egyének, beleértve azokat, akiknek instabil a műfogsoruk vagy tartósan erős vérzésük van az ínyből.
- Más érzékeny és törékeny szájüregi problémákkal küzdő egyének. Ez a termék nem ajánlott a fenti csoportnak, vagy használat előtt konzultáljon szakképzett fogorvossal.
- Ez a termék nem alkalmas fogyatékkal élő, mentális betegségben szenvedő, illetve a megfelelő tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek számára (beleértve a 0-12 éves gyermekeket is). Kivéve, ha gondviselőik felügyelete mellett használják.

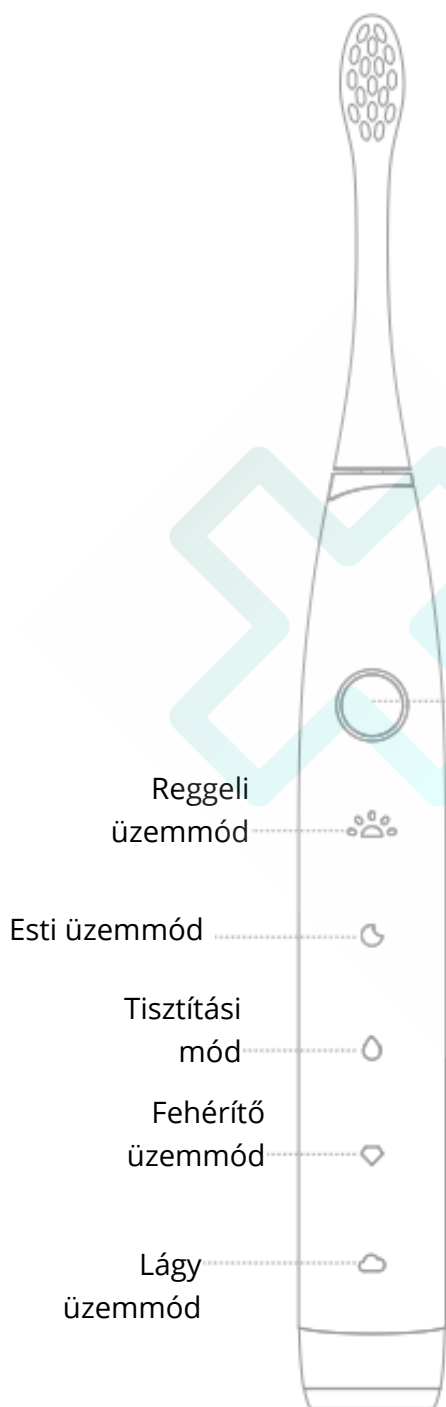

ON/OFF gomb vezérlés

Bekapcsolás:
nyomja meg röviden a gombot

Üzem mód váltás:
A gomb rövid megnyomását követő 5 másodpercen belül a gomb gyors rövid megnyomásával válthat az üzemmódok között, amikor az üzemmódjelző "lélegző fény" állapotban van.

Kikapcsolás:

1. A terméket kikapcsolhatja a gomb ismételt rövid megnyomásával, miután körkörös rövid ideig nyomta a gombot, amíg a termék "lágyszállapban" nem működik.
2. A termék kikapcsolható a gomb ismételt rövid megnyomásával, amikor az üzemmódjelző a "normál bekapcsolt" állapotban van, a fogkefe bekapcsolását követő 5 másodpercen belül.
3. Ez a termék automatikusan kikapcsol, miután 2 percig működött, miután röviden megnyomta a gombot az indításhoz.

Alacsony akkumulátor- emlékeztető: Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10%-nál alacsonyabb, a gomb kör alakú lámpa "pirosan villogó" állapotba kerül, miután röviden megnyomta a gombot a fogkefe bekapcsolásához.

Használati utasítás

Alapértelmezett kefése program

Öt fogmosási mód van beépítve a termékbe: Reggeli üzemmód, esti üzemmód, tisztító üzemmód, fehérítő üzemmód és lágy üzemmód.

- Reggeli üzemmód: az "esti üzemmódhoz" képest a nyomás alacsony. Tisztító és ápoló eszközként hatékonyan eltávolítja az alvás során keletkezett foglepedéket.
- Esti üzemmód: nagy nyomással mélyen eltávolítja a fogakon lévő ételmaradékokat és a foglepedéket.
- Tisztítási mód: megfelel a rutin és a szokásos tisztítás követelményeinek. Az "esti üzemmóddal" összehasonlítva a nyomás viszonylag gyengéd.
- Fehérítő üzemmód: hatékonyan tisztítja az erősen szennyezett azoknál, akik dohányzási szokásokkal rendelkeznek vagy gyakran kávéznak, teáznak stb.
- Lágy üzemmód: védi az íny egészségét, miközben alapvető funkciót lát el, illetve eltávolítja a foglepedéket azoknál, akik szájüregi érzékenységekben szenvednek.

USB C-típusú közvetlen csatlakoztatású töltés

Nyissa ki az elektromos fogkefe alsó fedelét, csatlakoztassa a C típusú interfészt a fogkefe alján lévő portba, csatlakoztassa az USBinterfész egyik végét a tápegységhez, a gomb kör alakú lámpa féhéren villog, és ez jelzi, hogy a fogkefe töltése folyamatban van.

Töltési folyamat

Töltési állapot: a gomb kör alakú lámpája féhéren világít és villog.

Első használat

A töltési idő a készülék akkumulátorának aktuális töltöttségétől függ.

Lemerült akkumulátor jelzése:

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10%-nál alacsonyabb, a gomb kör alakú lámpa "pirosan villogó" állapotban van, miután a fogkefe bekapcsolásához röviden megnyomta a gombot.

Óvintézkedések

Az akkumulátort a felhasználók maguk nem cserélhetik ki, azt csak az Oclean által felhatalmazott ügyfélközpontban dolgozó személyzet cserélheti ki, a nem szakképzett személyzet nem szerelheti szét a terméket saját maga, különben úgy tekintik, hogy a felhasználó automatikusan lemond a garanciáról.

Kérjük, töltsd az Oclean fogkefét 5V/1A vagy 5V/2A mobiltelefon-töltővel.


Ilyen mobiltelefon töltő például iPhone töltő, tablet töltő stb. Ha a töltőáram alacsonyabb, mint 1A, ez a töltési idő meghosszabbodását okozhatja, ha a fogkefét 5V-nál nagyobb feszültségű mobiltelefon-töltővel tölti, ez a töltőáramkör károsodását okozhatja.



- NE szedje szét, ne dobja le, ne préselje ki, és ne dobja tűzbe a készüléket.
- NE használja a fogkefét, ha az akkumulátora kidudorodik, vagy ha az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetnek tette ki.
- NE tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetnek.
- NE használja az akkumulátort, ha nedvességnek volt kitéve.

Mielőtt a készüléket kidobja, az akkumulátort ki kell venni belőle. Az akkumulátor eltávolítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni. Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.


Ajánlott fogmosási módszer

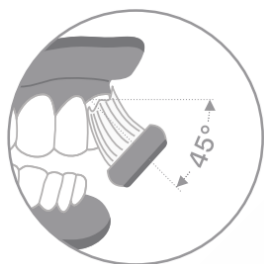

A fogkefét lassan, 45°-os szögben mozgassa a kefe és az íny vonalában. Ennek során nem szükséges kézzel fel és le kefélni.




Óvatosan fogja meg a fogkefe nyelét, lassan, körkörös mozdulatokkal mozogjon, és ne gyakoroljon túlzott nyomást.

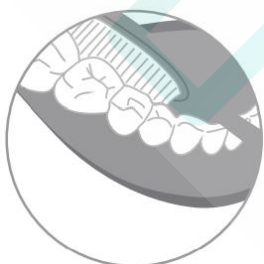

Kérjük, fogmosás után tiszta vízzel gargalizáljon.

Tisztítás és karbantartás

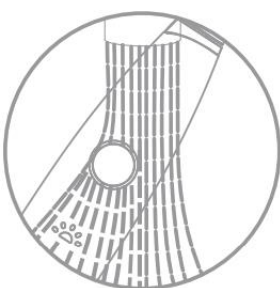

Öblítse le csapvízzel és szárítsa meg a levegőn, és ne húzza meg a kefefej sörtéit.

Termékleírások

Termék neve	Oclean Flow elektromos fogkefe
Modell	F5002
IP-besorolás	IPX7
A fogkefe teljesítménye	1.85W
Töltő	C típusú USB
Bemenet	5V 1A
Működési idő*	≤ 180 nap (*)
Az akkumulátor kapacitása	2500mAh (**)
Töltési idő	≤ 5 óra (***)
Végrehajtási szabvány	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

* Naponta 2 kefézési folyamattal és 2 percenként 2 perccel validálva. (Reggeli üzemmód)

** Az akkumulátor kapacitása elméletileg ±50mAh kapacitástúrésszel rendelkezik.

*** Javasoljuk, hogy fogadjon el USB-töltőt vagy 5 1A-t a telefoniparban.

Jótállási feltételek

A MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nél vásárolt új termékre 1 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylattal.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Bejegyzett székhely: 2096 Üröm, Kossuth utca 7/b.

Adószám: 27907759-2-13

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Oclean Flow elektromos fogkefe

Modell / típus: F5002

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU

irányelv

2014/35/EU

irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU

IRÁNYELVE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

