



W1

Használati utasítás

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

✉ info@medent.hu

☎ +36 30 647 2266

Importőr MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2096 Üröm, Kossuth
utca 7/b. Adószám: 27907759-2-13



Fontos biztonsági tanácsok


- Ez a termék csak Oclean speciális fúvókával használható. Az Oclean nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó tartozékok használatáért.
- Annak érdekében, hogy a víz ne spricceljen a szem, az orr, a fül vagy a torok felé, és ne okozzon véletlen sérülést, NE használja a szájüregi tisztításon kívül más célra.
- Olyan emberek, akik épp most estek át szájsebészeti beavatkozáson, akiknek szájbetegségük van, például súlyosan bevérzett az ínyük, ajánlott, hogy használat előtt konzultáljanak fogorvossal!
- Normális, hogy az első használat során minimális kellemetlen érzést vagy vérzést érezhet, ahogy a fogíny egészségesebbé válik ez teljesen meg fog szűnni. Ha 3-4 hét elteltével is vérzés jelentkezik, ajánlott fogorvoshoz fordulni.
- A gyermekek vagy csecsemők véletlen belélegzése által okozott sérülések elkerülése érdekében ez a termék csak 12 év feletti személyeknek ajánlott.



Utasítások


1. Töltse fel a víztartályt

A víztartályt kis erővel húzza lefelé, hogy levehesse. Töltsön vizet vagy szájvizet a víztartályba (a folyadék hőmérséklete nem lehet 40 °C-nál magasabb), majd helyezze vissza a készülékbe.

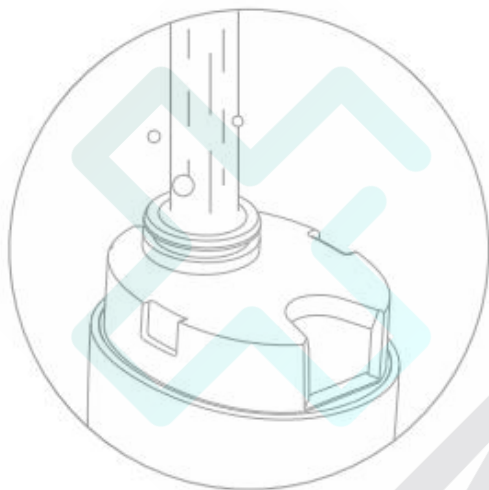


2. A fúvóka beszerelése

1. Rögzítse a szilikonsapkát a fúvókára.
2. Helyezze a fúvókát a készüléktestbe.

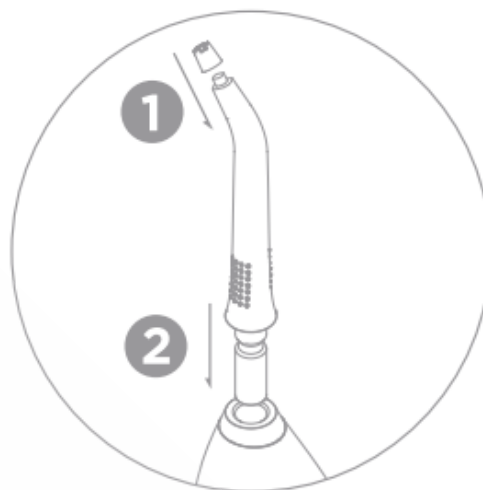


3. Üzem mód kapcsoló

Az üzemmódok kapcsoló rövid megnyomásával válassza ki a legmegfelelőbb üzemmódot, a készülék megjegyzi a legutóbbi üzemmódot.

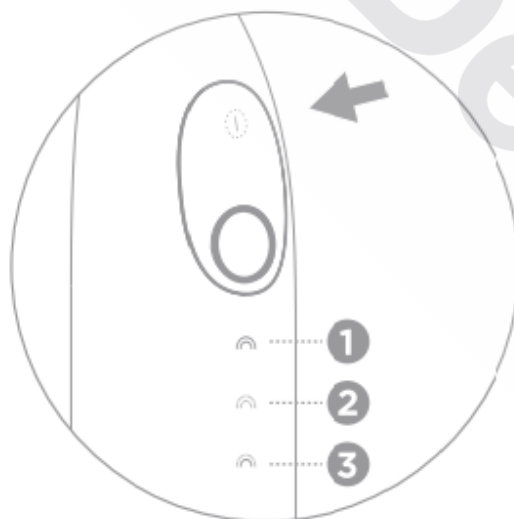


4. Öblítési utasítások

A fúvókát szakaszosan közelítse a fogak közötti részhez. A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot. Lassan haladjon az ínyvonal mentén a következő zónához, ismételje meg a tisztítást az összes résen.

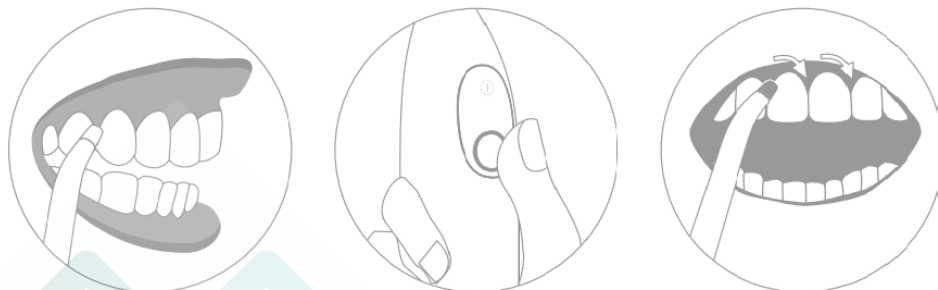

Készülék tisztítása és karbantartása

1. Vegye ki a fúvókát, minden használat után folyó vízzel tisztítsa meg.

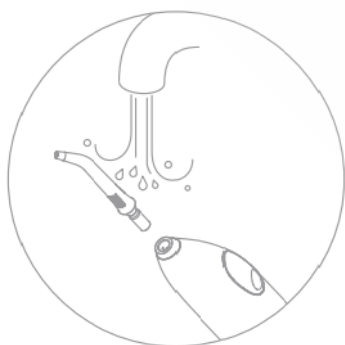

2. Vegye le a víztartályt, szabaduljon meg a maradék folyadéktól, és folyó vízzel tisztítsa meg..



3. A készülék felületét puha, nedves ruhával törölje át, hogy tisztán tartsa.



Fontos tippek

- Normális, hogy az első néhány "kitörés" csak gáz lehet, akkor válik levegő és víz keverékévé, amikor a víz eléri a fúvókát.
- NE áztassa a készüléket vízbe, használat után száraz ruhával tisztítsa meg.
- Ha a készüléket hosszú ideig polcon tárolja, kérjük, ürítse ki a víztartályt, hogy kiszáradjon. A maradék víz eltávolításához ajánlott a spray funkciót használni. Tisztítsa meg és tárolja a terméket hűvös és száraz helyen. NE tegye ki közvetlen napfénynek.
- Normális, hogy a készülék a tisztítás során kissé felmelegszik.
- Normális, hogy a tisztítás első néhány alkalomával jelentkezik egy kis műanyagíz, ez a szag többszöri használat után eltűnik.
- Kérjük, ürítse ki a víztartályt, és törölje szárazra, mielőtt az utazótáskába teszi.

Műszaki adatok

Termék neve	Oclean W1 intelligens szájoápoló
Modell	Oclean W1
Víztartály kapacitása	30 ml
Vízálló szint	IPX5
Bemeneti teljesítmény	2.5 W
Töltés	Oclean mágneses töltés
Bemenet	5V 0.5A
Az akkumulátor élettartama*	30 nap
Az akkumulátor kapacitása	1200 mAh
Töltési idő	3 óra
Standard	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

* Megjegyzés: Az akkumulátor élettartamát alapértelmezett üzemmódban, egyszer/nap, 1 tartály/idő alapján számították ki.

Egyéb tippek

- A fúvókát 4-6 havonta ajánlott cserélni. Ha a fúvóka súlyosan eltömődött, vagy nem lehet normálisan és szorosan a készüléktestre szerelni, azt is azonnal ki kell cserélni.

Jótállási feltételek

A MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nél vásárolt új termékre 1 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylattal.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: MEDent Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Bejegyzett székhely: 2096 Üröm, Kossuth utca 7/b.

Adószám: 27907759-2-13

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Intelligens szájöblítő

Modell / típus: W1

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU

IRÁNYELVE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

