

enbio.




Enbio S + Enbio PRO  
A világ leggyorsabb autoklávjai.  
B osztály.

Designed   
in Switzerland

## Más dimenzió. Azonos teljesítmény.

Az Enbio sterilizátorok akár 6-szor kisebbek és 3-szor könnyebbek, mint egy tipikus B osztályú / vákuumos autokláv. De ha a munka hatékonyságáról van szó, tartják a lépést.



	Általános autokláv	Enbio PRO	Enbio S
 Steril tasakok / óra	50	50	32
Vákuum / szárítás	✓	✓	✓

# Az idő pénz.



Egy forgalmas rendelői környezetben, ahol naponta több tucat fogászati vagy sebészeti beavatkozást végeznek, a megfelelő időzítés alapvető fontosságú. Az Enbio alapjaiban változtatja meg a sterilizálási munkafolyamatokat, mivel a drága műszerek újra sterilizálhatóvá válnak két páciens között vagy a sürgősségi sterilizálás percek alatt elvégezhető.



## Enbio Magic Filter felejtse el a vizet



Képzeljünk el egy versenyautót, amely egy teáskanálnyi üzemanyaggal tesz meg hosszú távot. Az Enbio autoklávok ilyenek. Az Enbio Magic Filterrel, hely a berendezés tartozéka, akár 1000 ciklust is lefuttathatnak mindössze 1 liter desztillált vízzel. Nincs szükség csapra vagy lefolyóra.



**1 liter  
desztillált víz**

**1000 ciklus\***



\* - Enbio PRO - 700 ciklus

# Enbio S. Sebesség bajnok.

Az Enbio S kompakt, szűk helyen is elfér. A hihetetlenül rövid ciklusidőnek köszönhetően megmenti a felhasználót vészhelyzetben, vagy lehetővé teszi a műszerek sterilizálását menet közben, a betegek között.



**B osztály**

Vákuum  
tasakok+  
szárítás



**Orvosi minősítés**

II. b osztályú orvostechnikai eszköz  
EN-13060 93/42/EGK irányelv

Csomagolás nélkül  
GYORS / 134°C

**7 perc**

Becsomagolt  
B osztály / 134°C

**15 perc**

Becsomagolt  
B osztály / 121°C

**30 perc**



reddot design award  
winner



Egységnyi súly

**15 kg**

Kapacitás

Max. csomagok mennyisége (kb.) **8**  
Maximális ajánlott eszköz súly **0,5 kg**  
Sterilizációs kamra hasznos térfogata **2,7 l**

Nyomás és hőmérséklet

Üzemi nyomás **2,1 Bar**  
Max. nyomás **2,3 Bar**  
Max. folyamat hőmérséklete **137°C**

Méretek

Szélesség **25 cm**  
Magasság **16 cm**  
Mélység **56 cm**

Elektromos

Tápegység **220-240V 50/60Hz**  
Beépített teljesítmény **2,25 kW**  
Maximális energiafogyasztás **10 A**



Egyéb

Behatolásvédelmi szint **IP20**  
Adatok archiválása **USB pendrive**  
Víz vezetőképessége\* **< 15 µS/cm**

\* - csak desztillált víz

# Enbio PRO. Kis alapterületen, nagy térfogat.

Az Enbio PRO ideális megoldás a rendelő alapvető munkaeszközeként. Szupergyors sterilizálás és hely a legtöbb műszer tárolására, beleértve a hagyományos méretű sebészi tálcákat is.

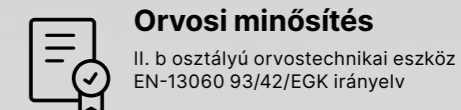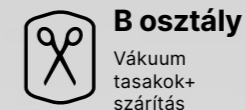

Csomagolás nélkül  
GYORS / 134°C

**9 perc**

Becsomagolt  
B osztály / 134°C

**18 perc**

Becsomagolt  
B osztály / 121°C

**30 perc**

Becsomagolt / PRION  
B osztály / 134°C

**43 perc**



Egységnyi súly

**20 kg**

Kapacitás

Max. csomagok mennyisége (kb.) **16**  
Maximális ajánlott eszköz súly **1,0 kg**  
Sterilizációs kamra hasznos térfogata **5,3 l**

Nyomás és hőmérséklet

Üzemi nyomás **2,1 Bar**  
Max. nyomás **2,3 Bar**  
Max. folyamat hőmérséklete **137°C**

Méretek

Szélesség **27 cm**  
Magasság **20 cm**  
Mélység **57 cm**

Elektromos

Tápegység **220-240V 50/60Hz**  
Beépített teljesítmény **2,45 kW**  
Maximális energiafogyasztás **15 A**

Egyéb


Belépés elleni védelem **IP20**  
Adatarchiválás **USB pendrive**  
Víz vezetőképessége\* **< 15 µS/cm**

\* - csak desztillált víz

# Implantológia



Az Enbio PRO az összes olyan népszerű implantológiai készletet képes sterilizálni, amelyek elférnek a 29×19×8 cm-es térben.

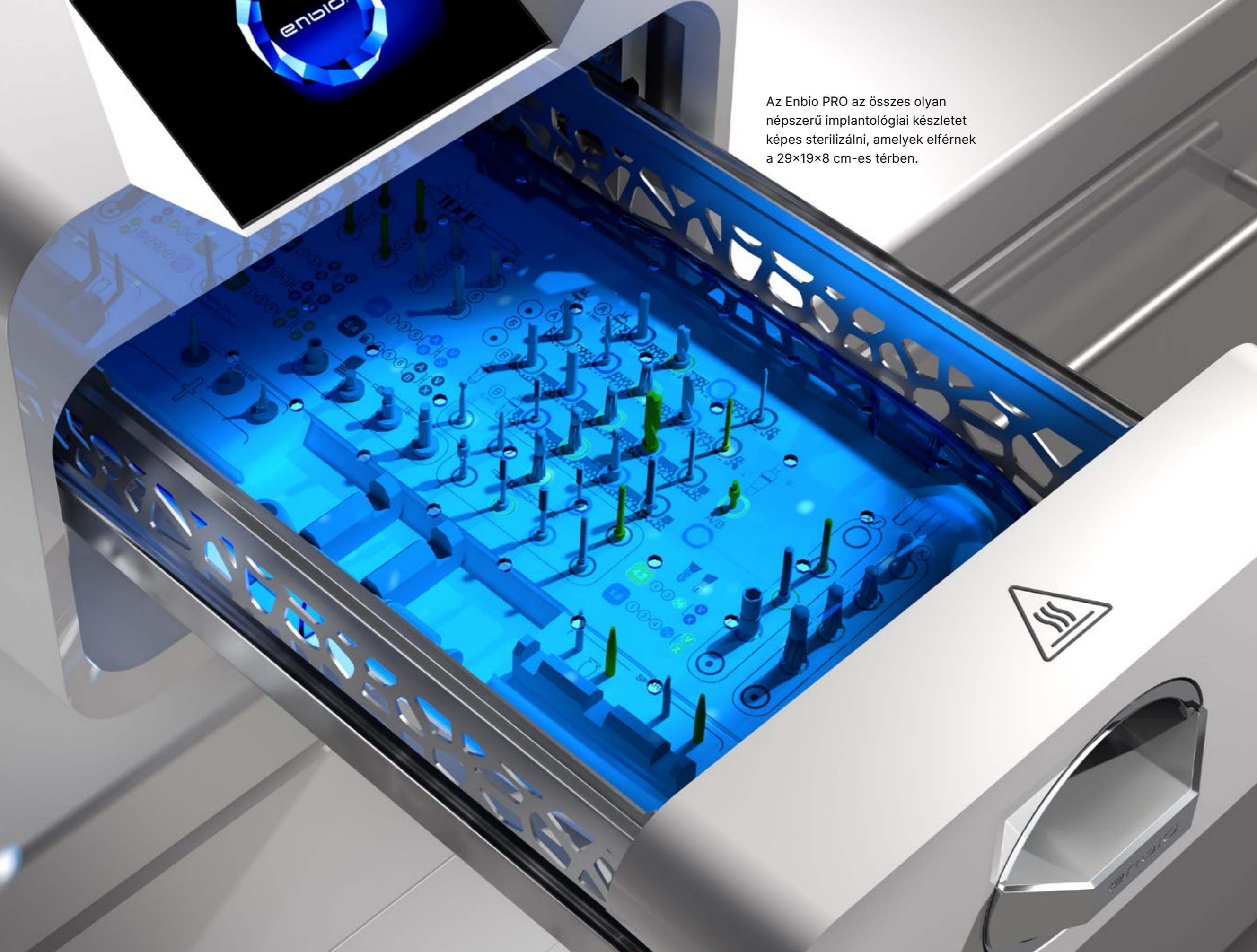

## Enbio felhasználói kézikönyv.





# 6 év alatt több mint 35 000 eladott autokláv.

Mindössze 6 év alatt az Enbio világméretű felhasználói közössége több mint 35 000 főre nőtt, akik az autoklávjainkban sterilizálják műszereiket ügyfeleik és pácienseik maximális biztonsága érdekében.





Designed  
in Switzerland

## Világszerte jelenlét.

Az Enbio autoklávokat az EU-ban gyártják, és az európai, észak-amerikai és közel-keleti logisztikai központokon keresztül világszerte forgalmazzák.

